

MELAG klasa PROFI

Najczęściej kupowane autoklawy na świecie



500.000 urządzeń MELAG na całym świecie

Jakość, na której możesz polegać.

Gabinety i kliniki lekarskie na całym świecie korzystają na doskonałej jakości urządzeń MELAG – made in Germany. Zaufaj niezawodnym i wydajnym autoklawom klasy PROFI.

Pozostałe poradnie lekarskie w swoim regionie znajdziesz na stronie:

www.melag.com/pl/referencje



„Dzięki niezawodnemu Vacuklav® oszczędzamy czas i mamy gwarancję bezpieczeństwa dla pacjentów i zespołu.”

 Gabinet lekarski
Frank Bachmann, Niemcy



„Nabycie rozwiązania systemowego MELAG to była dobra decyzja, dzięki której oszczędzamy czas i pieniądze na procesie sterylizacji.”

 28CliniC, Japonia



„Dzięki naszym autoklawom MELAG oferujemy najwyższej jakości opiekę medyczną naszym wiernym przyjaciołom: zwierzętom domowym!”

 Gabinet lekarza weterynarii
Animalogic, Hiszpania



„Klasa PROFI to gwarancja pierwszorzędnej jakości i najwyższych standardów technologicznych.”

 First Private Dental Center,
Ukraina



„Doceniamy niezawodność i możliwość integracji z elektroniczną dokumentacją.”

 Stomatologia SmartDental
Tomasz Kozerski, Polska



„MELAG to niezawodny partner w zachowaniu najwyższych standardów higieny i optymalnych przepływów pracy.”

 Sparkle Dental Boutique,
Abu Zabi



„Dzięki niezawodności, przyjaznej obsłudze i niskim kosztom zdecydowaliśmy się na klasę PROFI.”

 Platinum Orthodontics,
Ghana



„Dzięki systemom MELAG nasze procesy sterylizacji przebiegają sprawnie i bezpiecznie.”

 Prosthodontic Associates,
Australia

Autoklawy klasy PROFI

Wyniki przekonują.

Autoklawy klasy PROFI to gwarancja komfortu, trwałości i najwyższej jakości. Cechujące się wysoką trwałością, innowacyjne rozwiązania to wynik naszego wieloletniego doświadczenia konstrukcyjnego w segmencie sterylizacji narzędzi medycznych. Czym się wyróżniamy?



Doświadczenie:
Specjalizacja od 1951 r.



Zaufanie:
Ponad 500 tys. dostarczonych urządzeń MELAG



Jakość:
Made in Germany



Innowacja:
450 wykwalifikowanych pracowników w Berlinie



Rozwiązania systemowe:
Kompleksowe przygotowywanie narzędzi



Główne zalety produktów:

Wydajność

Duża pojemność komory i szybkie cykle pozwalają na efektywny przepływ pracy.

Bezpieczeństwo

Interfejs zintegrowany z dokumentacją gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesu.

Elastyczność

Skorzystaj z bogatej oferty naszych produktów – od urządzeń wolno stojących i ze stałym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, po trzy różne długości komory.

Łatwa obsługa

Koncepcja obsługi za pomocą 4 przycisków zapewniają intuicyjną obsługę urządzeń.



Odkryj główne zalety produktów w naszym filmie demonstracyjnym
www.melag.com/pl/multimedia



Różne warianty na różne potrzeby:

Vacuklav® 30 B+

Autoklaw ze stałym przyłączem wodociągowym długość komory 35 cm



Vacuklav® 31 B+

Autoklaw wolno stojący, długość komory 35 cm



Vacuklav® 23 B+

Autoklaw wolno stojący, długość komory 45 cm



Vacuklav® 24 B+

Autoklaw ze stałym przyłączem wodociągowym długość komory 45 cm



Vacuklav® 24 BL+

Autoklaw ze stałym przyłączem wodociągowym długość komory 60 cm



Główne zalety produktów klasy PROFi

Wyjątkowe korzyści.

Zdobądź więcej czasu na leczenie pacjentów. Przy konstruowaniu klasy PROFi od samego początku braliśmy pod uwagę wydajność i bezpieczeństwo przepływów pracy. Sprawdź zalety szybkich cykli sterylizacyjnych, intuicyjnej obsługi oraz różnych sposobów dokumentacji naszych autoklawów wolno stojących i posiadających stałe przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne:



Wydajność

Szybkie procesy sterylizacyjne w gabinecie: niezapakowane narzędzia w **Programie szybkim wraz z fazą próżni wstępnej** wyjąć można już po 15 minutach*. Sterylizacja narzędzi zapakowanych – w zależności od wielkości załadunku – zajmuje jedynie 28 minut (plus suszenie).

W celu optymalnego wykorzystania komory sterylizacyjnej do dyspozycji naszych klientów oddajemy różnego rodzaju stojaki. Indywidualnie dopasowane wyposażenie to gwarancja **optymalnej wielkości załadunku** autoklawu, maksymalnie do **7 kg**.



Bezpieczeństwo

Dla zagwarantowania najwyższej jakości autoklawy MELAG nadzorują wszystkie istotne **parametry procesów dzięki wysoce precyzyjnemu sterowaniu mikroprocesorowemu**. Bezpieczne protokoły, łatwy dostęp za pośrednictwem interfejsu.

Dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów sposób dokumentacji daje maksymalną elastyczność.

Zastosowanie rejestratora MELAflash CF-Card Printer, sieci MELAnet Box, drukarki MELAprint® 44 i oprogramowania MELAtrace® umożliwia dokumentowanie procesu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.



Elastyczność

Dzięki dwóm systemom klasa PROFi jest idealnie dostosowana do każdej sterylizatorni. Oferujemy **autoklaw ze stałym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym albo wolno stojący**.

Dzięki zintegrowanemu zasobnikowi oraz opatentowanemu systemowi chłodzenia powietrzem Vacuklav® 31 B+ i Vacuklav® 23 B+ **nadają się do każdego miejsca i są łatwe w montażu**.

Autoklawy klasy PROFi ze stałym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym wyróżniają się **wydajną technologią próżniową**. Zastosowanie urządzenia do uzdatniania wody to gwarancja mniejszego nakładu pracy dzięki zautomatyzowanemu systemowi doprowadzania i odprowadzania wody.



Łatwość obsługi

Prosta obsługa autoklawów klasy PRO ze **sprawdzoną koncepcją obsługi 4 przycisków** sprawi, że zyskasz czas dla Twoich pacjentów. Intuicyjna koncepcja obsługi zmniejsza nakłady pracy i pozwala uniknąć błędów podczas sterylizacji.


Dzięki naszym **narzędziom cyfrowym wprowadzisz proces sterylizacji narzędzi na wyższy poziom**. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami multimedialnymi na stronie MELAG.

Narzędzia cyfrowe dla inteligentnych przepływów pracy


Skorzystaj z pomocy naszych dystrybutorów w Twoim regionie i z narzędzi cyfrowych dostępnych na naszej stronie internetowej.



Biblioteka multimedialna
Ponad 280 filmów demonstracyjnych, które ułatwią bezpieczną sterylizację narzędzi:
www.melag.com/pl/multimedia

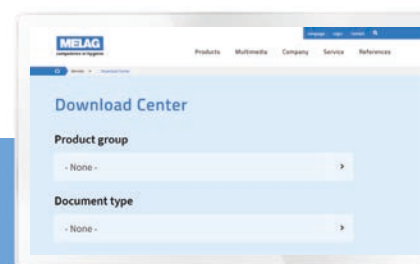

Materiały do pobrania
Dokumenty MELAG dostępne z każdego miejsca i w każdej chwili:
www.melag.com/pl/servis/obszar-pobierania

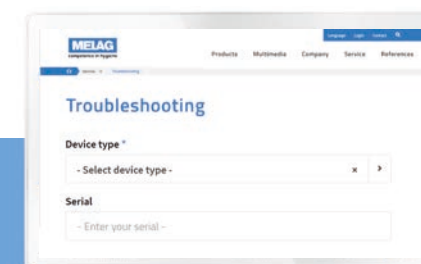

Rozwiązywanie problemów:
Podaj kod błędu, a otrzymasz rozwiązanie
www.melag.com/pl/service/troubleshooting

Rozwiązania systemowe MELAG

Zintegrowany system dla Twojego bezpieczeństwa.

Autoklawy klasy PROFI stanowią ważny element przygotowania narzędzi zgodnie z wytycznymi i z prawem polskim. D doskonała współpraca rozwiązań systemowych MELAG pozwoli na uzyskanie efektywnych przepływów pracy i zapewni najwyższej jakości ochronę dla pacjentów i personelu.

Wykorzystaj zalety rozwiązań systemowych MELAG z wyrobami wiodącego producenta rozwiązań zapewniających spełnienie standardów higieny w gabinetach lekarskich:



Osobiście:
W razie dodatkowych pytań możliwy kontakt z konsultantem.



Efektywnie:
Optymalizacja kosztów dzięki synchronizacji usług.



Dopasowanie do procesu:
Dopasowanie przepływu pracy i obsługi.

Zwiększ przygotowywania narzędzi: dezynfektor MELAtherm® 10 do szybkiego czyszczenia i dezynfekcji, zgrzewarki MELAseal® do bezpiecznego pakowania narzędzi oraz łatwe w obsłudze oprogramowanie MELAtrace® do dokumentacji i zwalniania procesu w połączeniu z autoklawami MELAG to gwarancja idealnych przepływów pracy w gabinecie lekarskim i w klinice.



*w powiązaniu z MELAtrace®

Proces przygotowania narzędzi:



✓ Czyszczenie i dezynfekcja – MELAtherm®



✓ Pakowanie – MELAseal®



✓ Sterylizacja –autoklaw klasy PROFI



✓ Dokumentacja i zwalnianie procesu – MELAtrace®



✓ Etykietowanie - MELAprint® 60

Perfekcja w każdym szczególe

Skonfiguruj własny profil autoklawu klasy PROFI.

Wykorzystaj potencjał autoklawów klasy PROFI: dostosowanie różnorodnego wyposażenia i akcesoriów rozwiązań systemowych MELAG do sterylizacji narzędzi pozwoli na osiągnięcie najlepszych rezultatów tych procesów.



System załadunku

W celu optymalnego wykorzystania komory sterylizacyjnej oferujemy idealne systemy załadunku o szerokim zastosowaniu.



Uchwyt A Plus
dostarczony bezpłatnie wraz z autoklawem do załadunku pięciu tac albo trzech kontenerów MELAstore Box na zestawy narzędzi

Tace:
nr. zam. 00230 do Vacuklav® 23 / 24 B+
nr. zam. 00280 do Vacuklav® 30 / 31 B+




System MELAstore®:
nr. zam. 01181 do MELAstore®-Tray 100
nr. zam. 01191 do MELAstore®-Box 100



Uchwyt D
do załadowania dwóch wysokich kontenerów sterylizacyjnych systemu MELAstore®:

nr. zam. 01182 do MELAstore®-Tray 200
nr. zam. 01192 do MELAstore®-Box 200

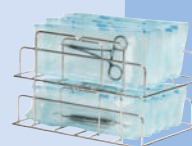

Uchwyt do folii
umożliwia pionową sterylizację zapakowanych narzędzi i optymalne wyniki suszenia

nr. zam. 22420 do Vacuklav® 23 / 24 B+
nr. zam. 22410 do Vacuklav® 30 / 31 B+



Dokumentacja

Autoklawy klasy PROFI gwarantują prawidłową dokumentację i aktywację procesu przy użyciu nowoczesnej technologii.



MELAtrace®
do profesjonalnej dokumentacji, zwalniania i archiwizacji całego procesu sterylizacji narzędzi.
nr. zam. 21138



MELAnet Box
przekazuje wszystkie protokoły do komputera i sieci w gabinecie.
nr. zam. 40296



MELAflash CF-Card Printer
w sposób łatwy i bezpieczny zapisuje wszystkie protokoły na karcie pamięci CompactFlash
nr. zam. 01039



MELAprint® 44
drukuję protokoły autoklawu w wersji papierowej
nr. zam. 01144



Uzdatnianie wody

Urządzenia do uzdatniania wody MELAdem® dostarczają wysokiej jakości wodę demineralizowaną w celu zachowania walorów autoklawu i ochrony narzędzi.



MELAdem® 40
Demineralizator działający według zasady wymiany jonowej polecany do trzech cykli sterylizacyjnych dziennie.
nr. zam. 01049



MELAdem® 47
Demineralizator działający według zasady odwróconej osmozy na potrzeby placówek medycznych o podwyższonym zapotrzebowaniu na sterylizację.
nr. zam. 01047



MELAdem® 53 / 53 C
To wysoko wydajny demineralizator działający według zasady wymiany jonowej współpracujący z MELAtherm® 10 i dodatkowo trzema innymi urządzeniami.
nr. zam. 01038



MELAjet®
umożliwia płukanie narzędzi wodą demineralizowaną*
nr. zam. 27300



Kontrola Bieżąca


Kontrole i dokumentacje wsadu są konieczne do weryfikacji wyników sterylizacji. MELAG oferuje niezawodne systemy dla autoklawów klasy B.



MELAcontrol®
przyrząd testowy Helix z 250 wskaźnikami gwarantuje niezawodną kontrolę sterylizacji
nr. zam. 01080



MELAcontrol® PRO
jako przyrząd testowy wielokrotnego użytku gwarantuje jeszcze bardziej ekonomiczną kontrolę sterylizacji.
nr. zam. 01075

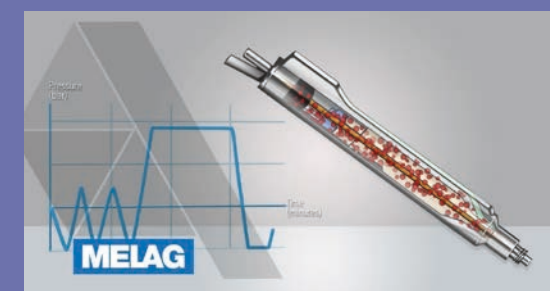

Więcej informacji na temat procesu sterylizacji w autoklawie klasy B znajduje się na stronie:

www.melag.com/pl/multimedia

*kompatybilny z MELAdem® 40 i MELAdem® 47

Dane techniczne

Liczby i fakty w skrócie.

Programy		Vacuklav® 31 B+ Vacuklav® 23 B+	Vacuklav® 30 B+ Vacuklav® 24 B+	Vacuklav® 24 BL+	Czas suszenia
Szybki program S*	134°C, czas wyjaławiania: 3,5 min.	15 min.	15 min.	20 min.	5 min.
Szybki program B**	134°C, czas wyjaławiania: 5,5 min.	30 min.	28 min.	32 min.	10 min.
Program uniwersalny	134°C, czas wyjaławiania: 5,5 min.	30 Min.	30 min.	35 min.	20 min.
Program ochronny	121°C, czas wyjaławiania: 20,5 min.	45 min.	40 min.	48 min.	20 min.
Program prion	134°C, czas wyjaławiania: 20,5 min.	45 min.	45 min.	50 min.	20 min.

* tylko do narzędzi niezapakowanych

** maks. 1,5 kg narzędzi zapakowanych albo maksymalna pojemność bez opakowania

	Vacuklav® 30 B+	Vacuklav® 31 B+	Vacuklav® 23 B+	Vacuklav® 24 B+	Vacuklav® 24 BL+
Typ urządzenia	ze stałym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym	wolno stojące	wolno stojące	ze stałym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym	ze stałym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym
Wielkość komory	długość 35 cm x Ø 25 cm		długość 45 cm x Ø 25 cm		długość 60 cm x Ø 25 cm
Pojemność komory*	17 l		23 l		29 l
Ładowość	5 kg narzędzi 2 kg tekstyliów	5 kg narzędzi 1,8 kg tekstyliów	5 kg narzędzi 1,8 kg tekstyliów	7 kg narzędzi 2,5 kg tekstyliów	7 kg narzędzi 2,5 kg tekstyliów
Wymiary (długość x wysokość x głębokość)	42,5 x 49,5 x 66 cm	42,5 x 49 x 62 cm	42,5 x 49 x 74 cm	42,5 x 49,5 x 70,5 cm	42,5 x 49,5 x 83,5 cm
	dopasowane do blatu 50 cm		dopasowane do blatu 60 cm		dopasowane do blatu 70 cm
Masa	45 kg	45 kg	50 kg	48 kg	53 kg
Zasilanie	230 V / 50/60 Hz		230 V / 50/60 Hz		230 V / 50/60 Hz
Moc	2.100 W		2.100 W		2.100 W

* zaokrąglona do pełnych litrów

Rozwiązania systemowe, innowacja i jakość

Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym, które od momentu powstania w 1951 r. specjalizuje się w produkcji wyrobów niezbędnych do zachowania standardów higieny w gabinetach lekarskich. Nasze przedsiębiorstwo dysponuje obiektami o łącznej powierzchni ok. 25 tys. m², zatrudniając ponad 450 pracowników wyłącznie na terenie Niemiec. Jesteśmy światowym liderem w produkcji urządzeń niezbędnych do sterylizacji narzędzi medycznych.



MELAG
competence in hygiene

Więcej informacji można
uzyskać na stronie:
www.melag.pl

MELAG Medizintechnik oHG