

MELAG

competence in hygiene

Pro e Prime Line

A Legend. Reborn.
Autoclavi di classe B e S.



#1

Le autoclavi più vendute
al mondo:
adesso ottimizzate!

NUOVO

Ora disponibili anche
come autoclavi di
classe S

Quality – made in Germany

Classe Profi HA SEGNATO UN'ERA

Venduta in tutto il mondo. Amata in tutto il mondo. MELAG è l'unica azienda mondiale a conduzione familiare che sviluppa e produce esclusivamente in Germania. Con oltre 300.000 unità vendute, la Pro-Class ha entusiasmato i clienti per decenni con l'eccezionale qualità MELAG - made in Germany. È giunto il momento di reinventare il classico più venduto.

Pro e Prime Line L'ALBA DI UNA NUOVA ERA

Conosci già le autoclavi di classe Profi? Allora non potrai non amare le nuove generazioni di dispositivi MELAG - dalle funzioni al prezzo! Perché la Pro Line (come autoclavi di classe B o S) e la Prime Line (come autoclavi di classe B) rimangono fedeli alla loro linea: performance eccellente, funzioni smart, un design moderno e robusto, tutto di serie. Perché un'autoclave non si deve mai fermare. Per questo non scendiamo a compromessi in termini di qualità e sviluppiamo secondo severi standard di qualità presso la nostra sede di Berlino.



- + Qualità "Made in Germany"**
per la massima affidabilità nella routine quotidiana di un ambulatorio
- + Impressionante velocità**
ai sensi della norma EN 13060 per un flusso di lavoro efficiente
- + Ottimi risultati di asciugatura**
a prova di ricontaminazione e corrosione
- + Comfort senza compromessi**
per un impiego semplice e sicuro
- + Sistema di documentazione smart**
per una certificazione completa e a norma di legge
- + Innovazioni orientate al futuro**
per un risparmio notevole di acqua e corrente elettrica
- Nuovo** **Ideale per il vostro budget e per gli strumenti**
con processi di sterilizzazione di classe B e S

Made in
Germany

Made in Germany. Made for You.

Le fondamenta del futuro: da oltre 70 anni sviluppiamo, produciamo e ottimizziamo le nostre soluzioni di sistema per il trattamento degli strumenti presso la sede principale di Berlino. Perché MELAG è sinonimo di arte ingegneristica e produzione "Made in Germany" ai massimi livelli di qualità.

INCREDIBILE

Sterilizzazione migliorata.

Più resa. Meno pretesa.

In termini di carico, sterilizzazione o documentazione, le nuove e compatte autoclavi MELAG di classe B e S offrono un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Non solo è possibile sterilizzare più strumenti in tempi più brevi, ma si risparmiano anche tempo e denaro, grazie alla comprovata qualità MELAG.

Più PERFORMANCE.

25% Riduzione di costi
fin dal primo giorno*

50% Manutenzione ridotta
grazie agli intervalli di assistenza ogni 2 anni
o ogni 2.000 cicli.*

96% Consumi di acqua ridotti
grazie al sistema orientato al futuro Stand
alone con raffreddamento ad aria efficiente.**

35% Tempi di ciclo ridotti
consentono un flusso di lavoro più efficiente,
e quindi più tempo per quello che conta
davvero: i pazienti.*

15% Carico maggiorato
con un massimo di 5 vassoi per la massima
flessibilità nella routine quotidiana
dell'ambulatorio: adesso e in futuro.*

100% Facilità d'uso
con display Smart Touch, l'indicatore di stato
LED e la documentazione su stick USB rendono
tutto più semplice.

COSTI ridotti.



Quick-Fact: cerchi un'autoclave per sterilizzare carichi ancora maggiori in tempi da record?

Allora approfitta della nostra classe Premium Evolution con qualità uniche al mondo.



* Rispetto ai modelli precedenti di classe Profi.

** Rispetto ai modelli precedenti di classe Profi con allacciamento alla rete idrica.



Amiamo la sterilizzazione e l'ambiente.

Pro e Prime Line uniscono protezione ambientale e redditività. Grazie al sistema Stand-alone, alla modalità Power Save e all'asciugatura DRYtelligence (inclusi in Prime Line), le nostre autoclavi sono la soluzione migliore per il budget e per l'ambiente.

2 grandezze. 4 modelli. Infinite possibilità.

Diverse versioni.

Per soddisfare le esigenze di diversi ambulatori, le nuove autoclavi MELAG sono disponibili nelle grandezze da 17 o 23 litri e con un'ampia gamma di funzioni.

ProLine

NUOVO (autoclavi di classe B e S)

Vacuclave 118 e Vacuclave 123

I nostri modelli entry-level: Come autoclave di classe B o S, la Pro Line offre tutto ciò che serve per una sterilizzazione sicura, conveniente e a basso consumo di risorse.



Processo sottovuoto ad alte prestazioni di classe B o S

Sterilizzazione affidabile fino a 6 kg su 5 vassoi in soli 15-28 minuti (asciugatura inclusa) - Made in Germany.



Display Smart Touch con LED di stato

Touch screen con struttura menu intuitiva per un semplice comando, come sul tuo smartphone - persino con i guanti.



Connettività e protocollo dati

Rispetto dei requisiti tramite messa a protocollo dei parametri di sterilizzazione via USB o rete.*



Tecnologia Stand-alone

Serbatoio dell'acqua integrato e raffreddamento ad aria efficiente per un funzionamento indipendente dal luogo senza acqua di raffreddamento.



Modalità risparmio energetico Power Save

Arresto del riscaldamento e del display tra le fasi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.*



Routine EasyCare

Ottimizzazione userfriendly per la massima efficienza nelle operazioni di sostituzione filtro, pulizia del serbatoio e fornitura idrica.

Vacuclave 318 e Vacuclave 323

Il top nel rapporto qualità-prezzo: Come autoclave di classe B, la Prime Line convince anche per le elevate capacità di carico, gli eccellenti risultati di essiccazione e le funzioni di rilascio prolungato.



Programma Heavy Duty-B

All'insegna della flessibilità: Prime Line offre un'eccezionale capacità di carico fino a 8 kg.



Asciugatura DRYtelligence

L'asciugatura basata su algoritmo garantisce risultati ottimali e, nello stesso tempo, un tempo di asciugatura ridotto fino all'80%.



Rilascio ProControl

Addio al registro di sterilizzazione!! ProControl consente il rilascio del lotto e l'autenticazione utente direttamente sul display, senza software extra.



Stampa etichette con codice a barre

Con MELAprint 80 è possibile stampare le etichette con codice a barre per l'identificazione e il tracciamento preciso degli strumenti.



PrimeLine

(autoclavi di classe B)

Ama la qualità. Ama il prezzo.



Risparmiate ancora di più:

Le autoclavi Pro Line di classe S offrono un'alternativa ancora più economica per gli studi e le cliniche che non necessitano di un'autoclave di classe B a causa degli strumenti utilizzati. Vacuclave 118 S e Vacuclave 123 S sterilizzano anche strumenti confezionati con corpi cavi semplici (ad esempio strumenti articolati come forbici e portaaghi).



Tutti i vantaggi delle combinazioni.

La soluzione di sistema MELAG

Ogni ambulatorio è diverso. Con le soluzioni di sistema personalizzate, siamo al tuo fianco come partner affidabile. Approfitta della perfetta sintonia tra apparecchi di termodisinfezione, autoclavi e soluzione software MELAG. Il sogno di un flusso di lavoro a basso consumo di tempo, spazio e costi, può diventare realtà.



Consulenza personale:

un partner di riferimento centrale per risolvere qualsiasi dubbio sul trattamento degli strumenti.



Efficienza:

costi ottimizzati grazie alla sincronia del servizio di assistenza per tutti gli apparecchi nel locale per il trattamento.



Processo ottimizzato:

sistemi di comando perfettamente sintonizzati per evitare errori nella routine di lavoro quotidiana.



Unico come prodotto, imbattibile nel sistema:



✓ pulizia e disinfezione con MELAtherm



✓ Imballaggio con MELAseal o MELastore



✓ Sterilizzazione a vapore con Vacuclave



✓ Documentazione e rilascio con MELAttrace



✓ Identificazione con MELAprint 80

Trova l'accessorio adatto alle tue esigenze e alla tua Vacuclave.

Flessibile per le tue esigenze

Grazie agli svariati accessori, è facile trovare la giusta configurazione per ogni esigenza. Vacuclave offre il meglio in termini di sicurezza ed efficienza, per ogni processo individuale nel trattamento degli strumenti.




Inquadra il codice a barre:
scopri i vantaggi delle nostre nuove
Pro e Prime Line

www.melag.com/it/multimedia

1. Scegli la configurazione adatta alle tue esigenze di carico:

Per un impiego ideale della camera di sterilizzazione, offriamo sistemi di caricamento ottimizzati.

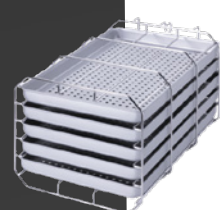

Rack di supporto A Plus

MELAstore Box 100 per set di strumenti:
Progettato per cinque vassoi per strumenti singoli o tre.



Rack di supporto:

Cod. art. ME82630 per camere profonde 45 cm
Cod. art. ME82620 per camere profonde 35 cm

Trays:

Cod. art. ME00230 per camere profonde 45 cm
Cod. art. ME00280 per camere profonde 35 cm



Portapellicola

Per la sterilizzazione verticale di strumenti imballati garantisce un'asciugatura ottimale.

Cod. art. ME22420 per camere profonde 45 cm
Cod. art. ME22410 per camere profonde 35 cm



Chamber Protect

Per la pulizia accurata delle superfici in acciaio inox. Il set di pulizia per camere contiene un detergente potente, 50 panni senza pelucchi e 1 panno in microfibra.

Cod. art. ME01081

2. Seleziona il tuo trattamento dell'acqua:

MELAdem fornisce acqua demineralizzata di qualità per il mantenimento ottimale delle autoclavi e degli strumenti.



MELAdem 40

È uno scambiatore di ioni compatto, per ambulatori con un massimo di tre cicli di sterilizzazione al giorno.

Cod. art. ME01049



MELAdem 47

È un impianto per osmosi inversa efficiente, per ambulatori che sterilizzano grandi quantità di strumenti.

Cod. art. ME01047



MELAdem 53 / 53 C

È un impianto di trattamento dell'acqua ad alta capacità per MELAtherm e per un massimo di altri tre apparecchi.

Cod. art. per MELAdem 53: ME01038
Cod. art. per MELAdem 53 C: ME01036



MELAJet

Consente il trattamento degli strumenti con acqua demineralizzata.*

Cod. art. ME27300

*Compatible with MELAdem 40 and MELAdem 53

3. Seleziona altri accessori per la documentazione:

Pro e Prime Line offrono una documentazione e approvazione a norma di legge con interfacce USB e di rete integrate.



MELAttrace

Consente procedure professionali di documentazione, rilascio e tracciabilità dell'intero programma di trattamento.**

Scarica MELAttrace ora gratuitamente con Licenza d'uso valida 90 giorni da :
www.melag.com



MELAprint 80

stampa etichette con codici a barre per un'etichettatura e una tracciabilità ottimali con MELAttrace e la linea Prime o file di registro con la linea Pro e Prime.**

Cod. art. ME01108



Stick USB MELAG

Memorizza i protocolli di sterilizzazione di Pro e Prime Line su un supporto dati digitale.

Cod. art. ME19901



MELAcontrol Helix

test con 250 strisce indicatrici, fornisce un controllo affidabile del risultato della sterilizzazione nel programma di tipo B.

Cod. art. ME01080

**Compatible from 01.07.2023

Numeri. Dati. Fatti.

Dati tecnici

Con un'ampia varietà di programmi, Pro e Prime Line garantiscono una sterilizzazione rapida, su misura per ogni esigenza:

NEU	Programmi con Pro Line (Autoclavi di classe S)	Tempi di ciclo Vacuclave 118 S (con carico minimo e massimo)*	Tempi di ciclo Vacuclave 118 S (con carico minimo e massimo)*	Asciugatura (temporizzata)
Universale S	134 °C, tempo di mantenimento: 5,5 min	18 – 23 min	20 – 25 min	25 min
Rapido S	134 °C, tempo di mantenimento: 3,5 min	13 – 19 min	16 – 20 min	5 min
Delicato S	121 °C, tempo di mantenimento: 20,5 min	33 – 37 min	36 – 38 min	25 min
Prione S	134 °C, tempo di mantenimento: 20,5 min	33 – 38 min	35 – 40 min	25 min

Programmi con Pro Line		Tempi di ciclo Vacuclave 118 (con carico minimo e massimo)*	Tempi di ciclo Vacuclave 123 (con carico minimo e massimo)*	Asciugatura (temporizzata)
Universale B	134 °C, tempo di mantenimento: 5,5 min	22 – 27 min	24 – 31 min	20 min
Rapido S	134 °C, tempo di mantenimento: 3,5 min	15 – 18 min	16 – 20 min	5 min
Rapido B	134 °C, tempo di mantenimento: 5,5 min	22 – 25 min	24 – 27 min	10 min
Delicato B	121 °C, tempo di mantenimento: 20,5 min	37 – 42 min	39 – 47 min	20 min
Prione B	134 °C, tempo di mantenimento: 20,5 min	37 – 42 min	37 – 48 min	20 min

Programmi di Prime Line		Tempi di ciclo Vacuclave 318 (con carico minimo e massimo)*	Tempi di ciclo Vacuclave 323 (con carico minimo e massimo)*	Asciugatura	
				DRYtelligence**	Temporizzato
Universale B	134 °C, tempo di mantenimento: 5,5 min	22 – 27 min	24 – 31 min	> 5 min	20 min
Rapido S	134 °C, tempo di mantenimento: 3,5 min	15 – 18 min	16 – 20 min	> 5 min	5 min
Rapido B	134 °C, tempo di mantenimento: 5,5 min	22 – 25 min	24 – 27 min	> 5 min	10 min
Delicato B	121 °C, tempo di mantenimento: 20,5 min	37 – 42 min	39 – 47 min	> 5 min	20 min
Prione B	134 °C, tempo di mantenimento: 20,5 min	37 – 42 min	37 – 48 min	> 5 min	20 min
Heavy Duty-B	134 °C, tempo di mantenimento: 5,5 min	22 – 32 min	24 – 35 min	> 5 min	30 min

* Dati per programmi di tipo B per un carico con imballaggio singolo e Rapido S per carico non imballato. I tempi possono variare secondo la tipologia e l'entità del carico.

** DRYtelligence adatta automaticamente il processo di asciugatura in funzione del carico. Grazie all'asciugatura intelligente, si ottengono sempre risultati di asciugatura ottimali.

Pro e Prime Line possono essere installate, in modo semplice e rapido, come autoclavi da tavolo in qualsiasi locale per il trattamento. Segue un elenco con una sintesi dei dati tecnici:

	Pro Line				Prime Line	
	Vacuclave 118	Vacuclave 118 S	Vacuclave 123	Vacuclave 123 S	Vacuclave 318	Vacuclave 323
Cod. art.	ME10118	ME10118S	ME10123	ME10123S	ME10318	ME10323
Tipo di dispositivo	Autoclave classe B Stand-alone (compatibile con impianto di trattamento dell'acqua supplementare)					
Classe autoclave	Classe B	Classe S	Classe B	Classe S	Classe B	Classe B
Dimensioni camera	ø 25 cm x 35 cm lungh.	ø 25 cm x 35 cm lungh.	ø 25 cm x 45 cm lungh.	ø 25 cm x 45 cm lungh.	ø 25 cm x 35 cm lungh.	ø 25 cm x 45 cm lungh.
Volume camera	17 litri	17 litri	23 litri	23 litri	17 litri	23 litri
Quantità di carico	Max 5 kg di strumenti / 1,8 kg di materiali tessili	Max 4 kg di strumenti / 1 kg di materiali tessili	max. 6 kg instru- ments / 2 kg textiles	Max 5 kg di strumenti / 1 kg di materiali tessili	max. 7 kg instruments / 1,8 kg textiles	max. 8 kg instruments / 2 kg textiles
Dimensioni dell'apparecchio (largh. x alt. x prof)	47 x 50 x 64 cm (apparecchio adatto per superficie da 60 cm)					
Peso	48 kg	46 kg	49 kg	47 kg	48 kg	49 kg
Alimentazione elettrica	220 – 230 V / 50 – 60 Hz					
Potenza assorbita	2.100 Watt					
Interfacce documentazione	USB, rete					

Rev.1-24/0466-03-24-IT-ME



Meno carta a favore dell'ambiente:

per ridurre il consumo di carta, la documentazione utente in formato elettronico è disponibile nel nostro download center. Maggiori informazioni alla pagina www.melag.com

MELAG
competence in hygiene